



オモイキリ eBAND 製品説明書

セット内容 ※ご確認下さい※

1. ケース×1
2. 装着ガイドシート×1
3. オモイキリ eBAND 本体×1
4. ふくろ×1

## 説明書

登録商標名 [オモイキリ e-band] は、勃起状態の減弱を実感される男性の、陰茎の硬度を回復させて、男の沽券と自信を回復させる勲章として開発した、唯一無二の道具であります。

バンドの構造はステンレス製のボールチェーンをバンド作用の基本として、ストッパーでお好きなサイズに調節できるため、どなたでも使用できます。

金属製のチェーン部分は、柔らかいシリコンのカバーで巻いて、直接肌に触れないようにしてあります。

また絞めたバンドは、解除に必要な時に、上にチェーンを引き上げるとワンタッチで解除できます。

サイズは日本人の平均値を参考にしていますので、安心してお使い頂けます。

高齢化がすすんで、血液の流入量が減少すれば、更に勃起力が減弱します。

その時はカバーの先端を 2~3mm カットして内径を縮小し、静脈からの血液の流出を少なくすることで硬度を演出できます。

※締め過ぎないように自分にあったサイズに調節して下さい。


※切断した部分の接着回復はできません。

## 取り付け・取り外し方法

1. 「オモイキリ eBAND (以下当商品)」をケースから出して下さい。
2. 先端の黒いボールを持って、チェーンを上にあげます。  
「解除状態」にします。※右図参照



ロック状態

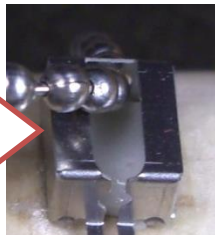


解除状態

お好みの長さにチェーンを合わせます。



3. お好みの長さに合わせられたら、チェーンを下に下げてロック状態にします。


※右図参照

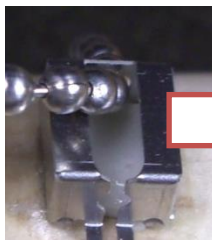

解除状態



ロック状態

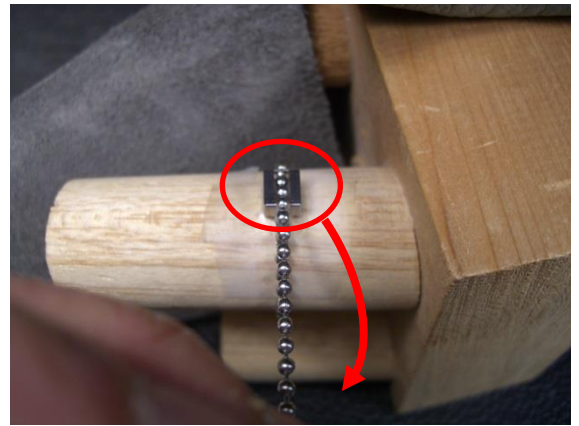

## Q&A（よくある質問）

### Q アレルギー持ちですが使用しても問題ないですか？

A 「シリコンアレルギー」の方はご使用をお避けください。

※使用に不安な方は医師とご相談下さい。

### Q 石鹸等で洗っても問題ないですか？

A 一般的な石鹸で洗っていただくのは問題ございません。

※「ベンザルコニウム塩化物」の製品が入っている石鹸・洗剤などの洗浄はお控えください。  
シリコンが硬化する恐れがあります。

### Q 装着するのは難しいですか？

A 初めは「慣れ」が必要かと思いますので、事前に装着練習して下さい。

4, 5 回練習すればスムーズに装着できます。

### Q どのタイミングで装着すればいいですか？

A 事前（勃起前）に装着するようにお願いいたします。

※勃起後だと正常に装着出来ないなど、締め方に不備が生じます。

### Q 勃起状態の持続時間はどれくらいでしょうか？

A 締めている間は勃起状態が続きますが、気分が削がれると血液の流入が減少するので、勃起状態は衰えます。

### Q 故障した場合修理していただけますか？

A シリコンの破損、チェーンの切断等の場合、有料にて修理をお受けいたします。

※部品代と送料をご負担願います。

ご不明な点がございましたら下記 URL にてご覧ください。

<http://eband.iinaa.net/eband.html>